

マイクロミキサー E-022T

ELISAのルーチン作業や各種のマイクロチューブにも対応。  
 攪拌速度300~2500r/min。静かな動作音の  
 ウェルプレート/チューブミキサー。

NEW



特長

- 96穴ウェルプレートやマイクロチューブの攪拌に最適
- マイクロチューブ用のラックは別売

用途

- 酵素反応の促進(マウステールの酵素消化等)
- ELISA反応の促進、バイオパニング等
- プラスミドDNA抽出等

振とう機




タイテックのNewブランド  
【ネクスト】





●参考:WellやDeep Wellの寸法について

E-022T及びMBR-022R/KについてはWellの長辺が125mmより幅が小さい容器は本体付属の固定用のアダプターを使用して取付けます。

写真は E-022に WP-9602をセットした状態です。Wellが固定できない場合はゴムの厚さを調整する必要があります。その際は最寄りのTSCにお問い合わせ下さい。

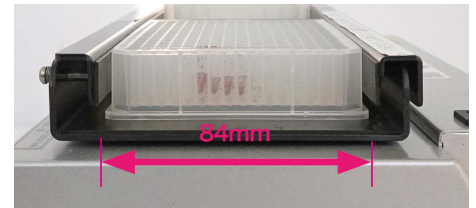

●外形図

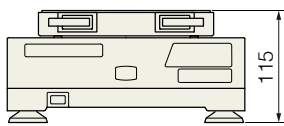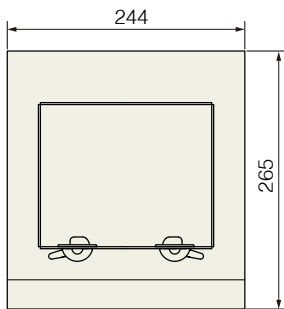

スペース難の  
ラボにも最適ですね!!



●オプション:スタックケース

震動対策により、2段での設置が可能になりました。恒温庫内で使用する際にもご活用ください。(E-022では3段も可能)



SKE-2



SKE-3



SKT-2

型名	E-022T
振とう方式	水平偏芯震動(S-Max drive)
震動速度	300~2500r/min
速度表示/設定	デジタル表示/入力
使用環境温度範囲	+4°C~+40°C
適用容器	ウェルプレート(2個。ディープウェルも標準で2個取り付け可能) マイクロチューブ(左ページのオプションラックが必要)
安全器/安全機能	ヒューズ、過電圧/過電流保護、不揮発メモリー異常、スピードリミットエラー、表示/測定範囲エラー、モーター過負荷
本体外形寸法	244×265×115Hmmm
本体質量	約6kg
標準付属品	電源コード、ヒューズ(ヒューズホルダー内蔵)
電源	AC100V・0.5A
本体価格	¥165,000

品名/型名	適用容器/備考	価格
SKE-2	E-022、2台まで。361×330×205Hmmm	¥44,000
SKE-3	E-022、3台まで。361×439×393Hmmm	¥49,000
SKT-2	E-022T、2台まで。307×406×235Hmmm	¥44,000

更に詳しい情報は QR コードまたは <https://taitec.info/2024b/65> にて

●製品Web●ウェビナー動画: 1.5mLマイクロチューブ、水平偏芯震動の様子(E-36)

●温調機能付きの上位モデル→P.018

